

# Filtek™ Bulk Fill

Resina Fluida



## Resina fluida para procedimientos rápidos y resistentes

### Ventajas:

- Hasta 50% más resistente que la resina fluida líder del mercado<sup>1</sup>
- Casi dos veces más resistente al desgaste que otras resinas fluidas líderes en el mercado<sup>2</sup>
- Presentación en jeringas fáciles de usar
- 4 tonos: A1, A2, A3 y Universal


La tendencia a realizar procedimientos rápidos y sencillos sigue creciendo. Como líderes confiables en el mercado de restaurativos dentales, en 3M ESPE hemos logrado mejorar no solo el procedimiento, sino también los resultados, con Filtek™ Bulk Fill Resina Fluida.

Además de ser fácil de dispensar y aplicar, le ofrece:

- Una profundidad de fotocurado de 4 mm, que reduce la necesidad de las capas incrementales y el riesgo de contaminación.
- Baja contracción a la polimerización, que permite su aplicación en bloque y reduce la sensibilidad posoperatoria.
- Buena adaptación marginal.
- Una viscosidad fluida con una adaptación más fácil en las paredes cavitarias, que requiere menor instrumentación.


Para procedimientos más sencillos sin comprometer el éxito clínico, escoja Filtek™ Bulk Fill Resina Fluida.

### Mayor resistencia a la compresión que otros competidores líderes en el mercado

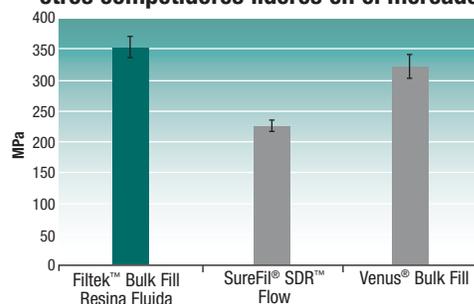

Fuente: Archivos internos de 3M ESPE

### Mejor resistencia al desgaste que otras resinas fluidas líderes en el mercado (tres cuerpos, *in vitro*)

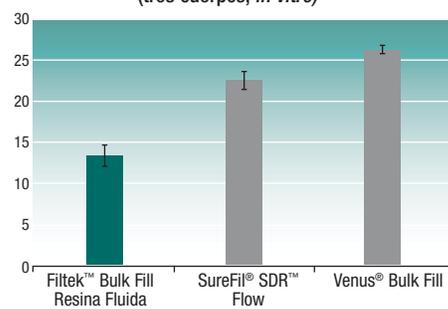

Fuente: Archivos internos de 3M ESPE

1. Comparada con SureFil® SDR™ Flow (ver Gráfica 1).  
2. Ver Gráfica 2. Datos *in vitro* en archivo.

# Escoja Filtek™ Bulk Fill Resina Fluida para restauraciones posteriores rápidas y sencillas



1

Prepare el diente y aplique el adhesivo.



2

Coloque hasta 4 mm de Filtek™ Bulk Fill Resina Fluida en la cavidad preparada y fotopolimerice.



3

Aplique una capa de 2 mm (mínimo) de una resina estética –como Filtek™ Z350 XT Resina Universal o como Filtek™ Z250 XT– y fotocure.

Las fotos clínicas son cortesía del Dr. Reich, Seefeld, Alemania.

## Información para pedidos

### Filtek™ Bulk Fill Resina Fluida

Repuesto	Artículo No.
<b>TONO</b>	<b>JERINGA</b>
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universal	4862U
<b>Artículo No.</b>	<b>Descripción del producto</b>
3740T	<b>Puntas de dispensado</b> 20 puntas dispensadoras naranja calibre 19

**REPUESTO EN JERINGAS:** Incluye 2 jeringas de 2 g, 20 puntas dispensadoras, guía técnica, instrucciones de uso.



Filtek™ Bulk Fill Resina Fluida– Jeringa

[www.3MESPE.com](http://www.3MESPE.com)

**3M ESPE**

#### Productos Dentales

3M Center  
Building 275-2SE-03  
St. Paul, MN 55144-1000  
EUA  
1-800-634-2249

3M, ESPE y Filtek son marcas registradas de 3M Company o 3M Deutschland GmbH.  
© 2014, 3M. Todos los derechos reservados.  
SureFil y Venus no son marcas registradas de 3M.